



**BRODA**<sup>®</sup>  
*Comfort is Essential*

**SYNTHESIS**  
*FAUTEUIL INCLINABLE  
À ALLONGEMENT COMPLET*

# SYNTHESIS FAUTEUIL INCLINABLE À ALLONGEMENT COMPLET V4

## LA SYNTHÈSE DU CONFORT, DE LA FONCTIONNALITÉ ET DU STYLE

Le fauteuil inclinable à allongement complet Synthesis V4 s'inspire de l'héritage de confort et de fiabilité qui a fait la renommée de BRODA pour réunir une gamme complète de fonctionnalités dans une conception moderne et progressive.



- 1 SIÈGE INCLINABLE À TOUTES LES POSITIONS
- 2 DOSSIER ALLONGEABLE À TOUTES LES POSITIONS
- 3 APPUIS-BRAS RÉGLABLES EN HAUTEUR
- 4 APPUIS-BRAS PIVOTANTS ET AMOVIBLES
- 5 BUTÉES AJUSTABLES POUR UN SOUTIEN LATÉRAL SUPÉRIEUR
- 6 REPOSE-JAMBES PIVOTANT ET INDÉPENDAMMENT AJUSTABLE EN LONGUEUR ET EN HAUTEUR
- 7 REPOSE-PIEDS AMOVIBLE ET REPLIABLE
- 8 ROULETTES ARRIÈRES AUTOBLOQUANTES DIRECTIONNELLES

### AVANTAGES POUR LE PATIENT



L'inclinaison du siège avec pivot avant permet aux patients de maintenir un champ de vision qui favorise la socialisation et la participation.



L'allongement du dossier facilite les transferts couchés et réduit le risque de chutes et de blessures.



Le centre de gravité plus bas procure une sécurité et une stabilité inégalées dans l'industrie, même en cas de forte agitation et de mouvements involontaires (modèle illustré avec roues mag offertes en option).



Les butées permettent l'ajustement en hauteur et en largeur, pour un soutien latéral supérieur personnalisé.

### AVANTAGES POUR LE PERSONNEL ET LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

- L'inclinaison postérieure améliore la redistribution de la pression et contribue à protéger l'intégrité de la peau
- L'inclinaison et l'allongement facilitent les changements de position fréquents, ce qui contribue à la guérison des patients
- Améliore le positionnement et comprend des fonctions qui réduisent les transferts et favorise une manipulation des patients plus sécuritaire
- L'alignement du siège prévient la fatigue et les déviations de posture du patient, ce qui permet de réduire le recours aux contentions
- La structure procure une durabilité supérieure et permet de réduire les coûts d'entretien et de remplacement de l'équipement

**BRODA**<sup>®</sup>  
Comfort is Essential

# SYNTHESIS FAUTEUIL INCLINABLE À ALLONGEMENT COMPLET

## V4

### AVANTAGES DU SYSTÈME COMFORT TENSION SEATING®

- Position assise confortable à long terme
- Soutien conforme assurant la position adéquate du pelvis
- Aération améliorée réduisant l'accumulation de chaleur et d'humidité
- Redistribution de la pression pour protéger l'intégrité de la peau
- S'adapte à diverses conditions comme la cyphose et la lordose
- Pression réduite; circulation sanguine et oxygénation du tissu accrues



Les courroies CTS assurent un ajustement individuel et un confort supérieur.


### SPÉCIFICATIONS

Structure	Acier tubulaire de calibre 16
Siège et dossier	BRODA Comfort Tension Seating®
Degré d'inclinaison	40°
Degré d'allongement	90° (position de Trendelenburg possible)
Largeur du siège (standard)	16", 18", 20" (40 cm, 45 cm, 50 cm)
Larg. du siège (personnalisée)	22", 24", 26" (55 cm, 60 cm, 65 cm)
Profondeur du siège (standard)	17", 18,5" (43 cm, 46 cm)
Prof. du siège (personnalisée)	20" (50 cm)
Hauteur du siège (standard)	20,5" (51 cm)
Haut. du siège (personnalisée)	19", 22", 23,5" (48 cm, 55 cm, 59 cm)
Roulettes avant	5", autobloquantes à toutes positions (12,5 cm)
Roulettes arrière	6", autobloquantes à toutes positions (15 cm)
Roues mag optionnelles	20" ou 22" arrière (50 cm ou 55 cm), 14" arrière ou milieu (35 cm)
Roulettes avant optionnelles	Roulettes en alum. de 5" (roues mag arrière seul.)
Capacité de poids	350 lb (159 kg)
Rembouillage standard (couleur d'accent)	Appui-tête, coussins pour épaules, butées latérales supérieures et inférieures, repose-pieds
Rembouillage standard (vinyle noir)	Coussins pour siège, dossier et jambes avec housses

### ACCESSOIRES COURANTS


- Ensemble de roues mag
- Roulettes avant en aluminium
- Ensemble de coussins HSP
- Recouvrement complet en vinyle du siège et du dossier
- Repose-jambes ABS
- Plateau solide ou transparent
- Demi-plateau
- Couvre-plateau coussiné
- Ceinture abducteur
- Appuis-bras coussinés
- Support à oxygène
- Poteau pour soluté
- Ensemble de positionnement Broda app

### OPTIONS DE REMBOURRAGE

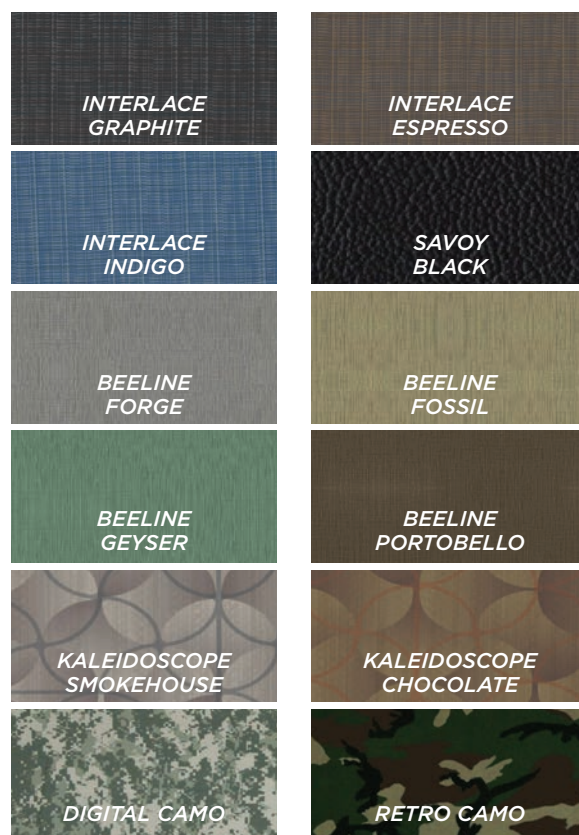

\* Par respect, les styles camo sont offerts aux anciens combattants seulement.

### OPTIONS POUR LA STRUCTURE

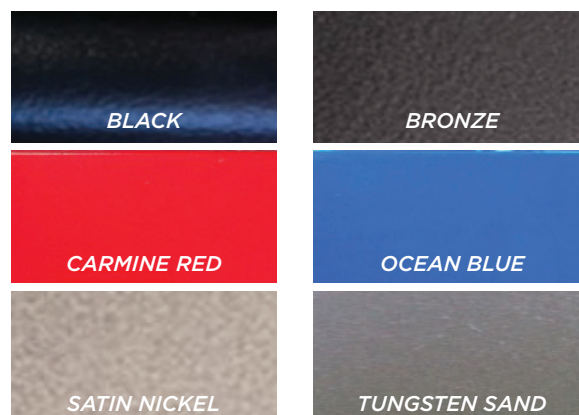



HEALTHCARE DIVISION

[info@brodaseating.com](mailto:info@brodaseating.com)

Tél. : 1-844-552-7632

[Brodaseating.com](http://Brodaseating.com)

©Broda USA, INC.

8/16